



[ TFシリーズ ]

C14486GA

## 近赤外域用、小型・薄型、 InGaAsリニアイメージセンサ搭載

ミニ分光器 TFシリーズは、光学素子とイメージセンサと駆動回路を小型・薄型の筐体にまとめた分光器 (ポリクロメータ)です。測定光を光ファイバ経由で入光し、分光結果をUSB接続でPCに取り込むことにより、分光スペクトルの収集が可能です。また、短時間蓄積に対応したトリガ機能により、パルス発光の分光計測も可能です。

本製品には、測定条件の設定、データの取得および保存、グラフの表示などの機能をもつ評価用ソフトウェアが付属されています。また、DLLの関数仕様を公開しているため、ユーザーサイドで独自の計測ソフトウェアを作成することが可能です。

### 特長

- 小型・薄型
- InGaAsリニアイメージセンサを内蔵
- トリガ機能付き
- 石英透過型グレーティングによる高スループット
- 外部電源不要 (USBバスパワー駆動)
- 機器への組み込みが容易
- 波長変換係数\*1を内蔵メモリに記録

\*1: イメージセンサの画素 No.を波長に変換する係数。A/D変換後のカウント値を入力光量に比例する値に変換する係数を用意していません。

### 用途

- 食品の糖度・水分検出
- 膜厚測定

### 構成

項目	仕様	単位
外形寸法 (W × D × H)	80 × 60 × 12	mm
質量	88	g
イメージセンサ	InGaAsリニアイメージセンサ	-
画素数	256	画素
スリット*2 (H × V)	25 × 250	μm
NA*3	0.22	-
光ファイバ用コネクタ	SMA905D	-

\*2: 入射開口部の大きさ

\*3: 開口数 (立体角)

### 絶対最大定格

項目	定格値	単位
動作温度*4	+5 ~ +50	°C
保存温度*4	-20 ~ +70	°C

\*4: 結露なきこと

高温環境においては、製品とその周囲で温度差があると製品表面が結露しやすく、特性や信頼性に影響が及ぶことがあります。注) 絶対最大定格を瞬でも超えると、製品の品質を損なう恐れがあります。必ず絶対最大定格の範囲内で使用してください。

## 光学的特性

項目	仕様	単位
感度波長範囲	950 ~ 1700	nm
波長分解能 (半値幅) <sup>*5</sup>	Typ.	5.0
	Max.	7.0
波長再現性 <sup>*6</sup>	-0.4 ~ +0.4	nm
波長温度依存性	-0.05 ~ +0.05	nm/°C
輝線迷光 <sup>*5 *7</sup>	-33 max.	dB

\*5: 「構成」の表中のスリット使用時。波長分解能はスリットに依存します。


\*6: 入光条件などが一定の場合

\*7: 1300 nmの光を入力したときに測定されるカウントと、その波長の±40 nmで測定されるカウントの比

## 電気的特性


項目	仕様	単位
A/D変換	16	ビット
蓄積時間	1 ~ 100000	μs
インターフェース	USB 2.0	-
USBバスパワー消費電流	Typ.	220
	Max.	250

## 分光感度特性 (代表例)

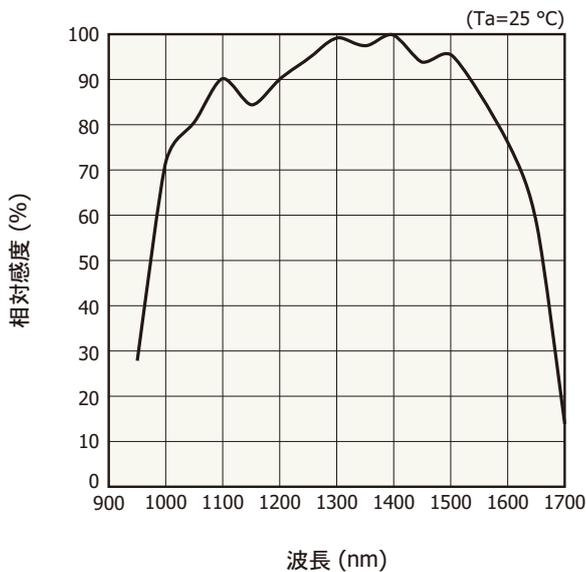


KACCB05091A

## 波長分解能 - 波長 (代表例)

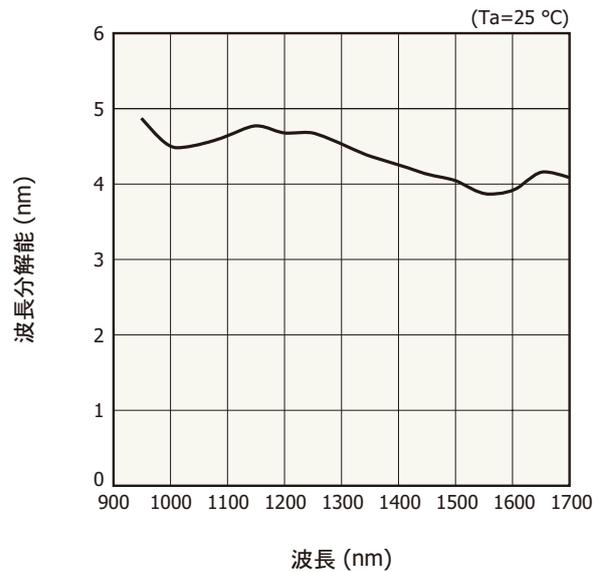


KACCB05101A

## 直線性 (代表例)

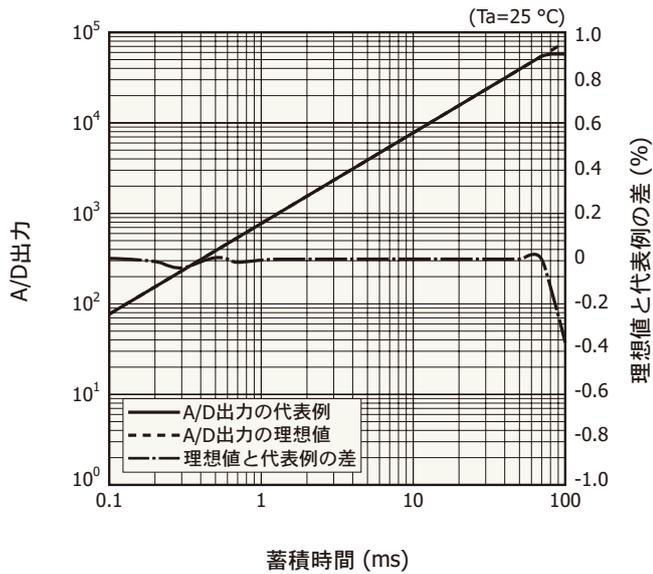

KACCB05113A

## 暗出力-温度 (代表例)

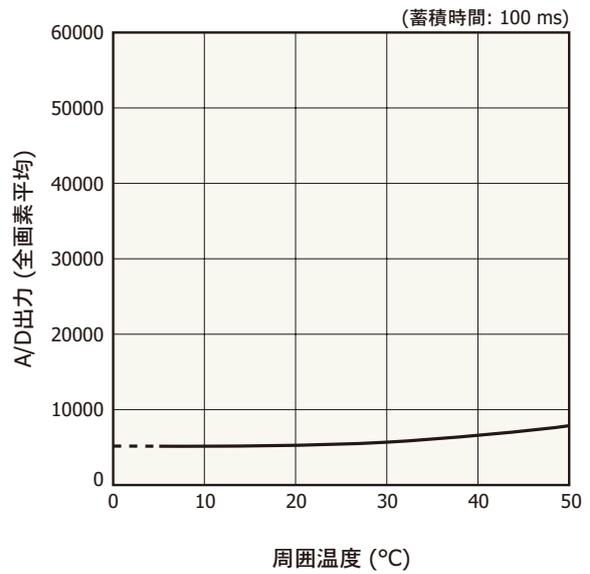


KACCB05123A

A/D出力は、光入射時の出力から暗出力を減算したものです。理想値と代表例の差には、測定誤差が含まれます。A/D出力が小さいときは、測定誤差が大きくなります。

A/D出力は、センサおよび回路のオフセット出力とセンサ暗出力が加算されたものです。

## 光学系配置図


ミニ分光器 TFシリーズは、石英製の透過型ホログラフィックグレーティングを採用し、光学系を堅牢な光学ベース上に配置することにより、高いスループットと高精度な光学特性を実現しています。

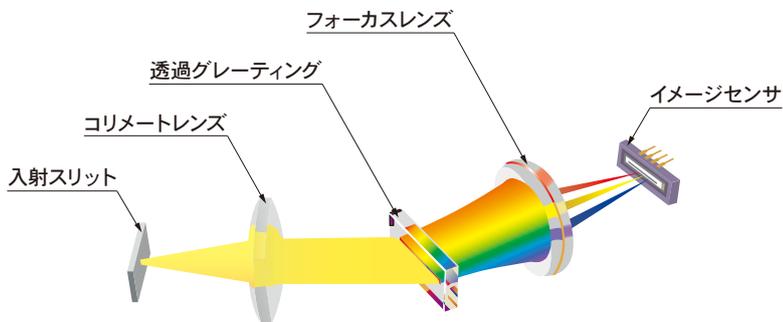

KACCC09173A

## 接続例 (透過光計測)

測定光を光ファイバ経由で入光し、分光結果をUSB接続でPCに取り組むことにより、分光スペクトルの収集ができます。装置内部に可動部分がないため、常に安定した測定が期待できます。また、導光部に光ファイバを用いているため、測定物へのフレキシブルなセッティングが可能です。

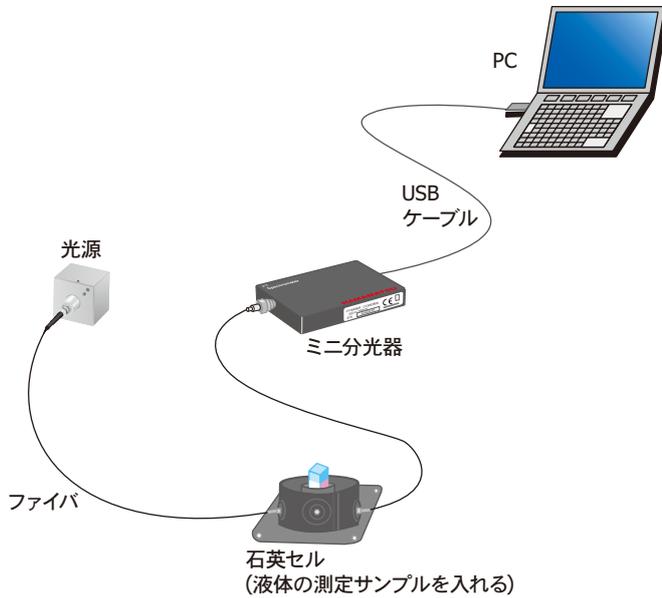


KACCC07673C

## トリガの動作モード

C14486GAにおいては、以下に示すトリガの動作モードがあります。これらの動作モードはC14486GAに付属されている評価用ソフトウェア上で選択することができます。

### (1) ソフトウェアトリガ入力時のデータ計測 (非同期)


PCからのソフトウェアトリガの入力の後に最初に変換されるデジタルデータを取得します。

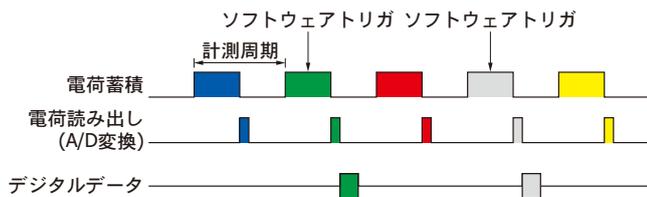

KACCC05033C

### (2) ソフトウェアトリガ入力時のデータ計測 (同期)


PCからのソフトウェアトリガの入力によりセンサ動作 (蓄積) を開始します。

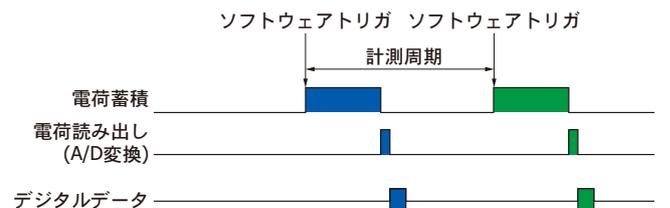

KACCC05053B


## (3) 外部トリガ入力時のデータ計測 (非同期)

外部トリガ端子に入力した外部トリガのエッジ (立ち上がり/立ち下がり) は設定可能)の後に最初に変換されるデジタルデータを取得します。

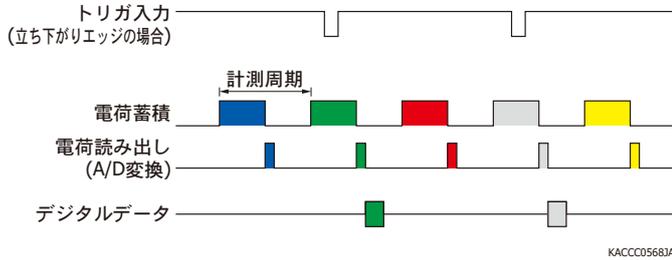


## (4) 外部トリガ入力時のデータ計測 (同期)

外部トリガ端子に入力した外部トリガのエッジ (立ち上がり/立ち下がり) は設定可能)によりセンサ動作 (蓄積)を開始し、デジタルデータを取得します。

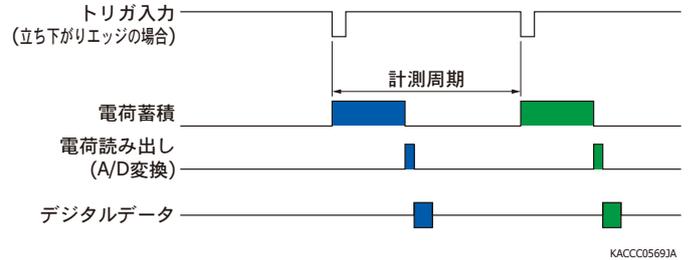


## (5) 外部トリガ入力時のレベルによる計測 (非同期)

外部トリガ端子に入力した外部トリガ (Highレベル/ Lowレベルは設定可能)があったときのデジタルデータを取得します。

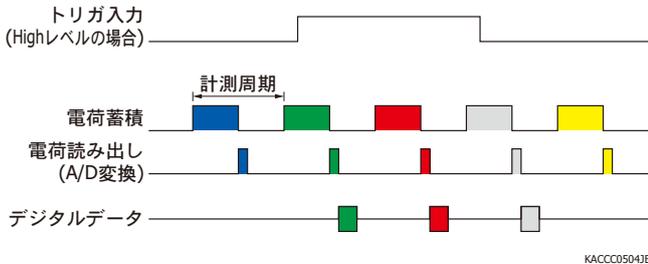

## (6) 外部トリガ入力時のレベルによる計測 (同期)


外部トリガ端子に入力したトリガ (Highレベル/ Lowレベルは設定可能)によりセンサ動作 (蓄積)を開始し、デジタルデータを取得します。

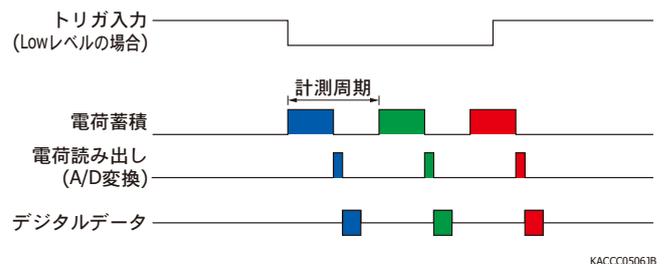

(1) ~ (6)のいずれのモードでも、トリガ入力間隔が分光器の計測周期より短い場合には、入力されたトリガは無視されます。

## (7) 外部トリガ信号出力


外部トリガ端子から蓄積開始タイミング (パルス幅: 10  $\mu$ s)を出力することができます。(トリガ出力エッジ: 立ち上がり/立ち下がり) は設定可能)

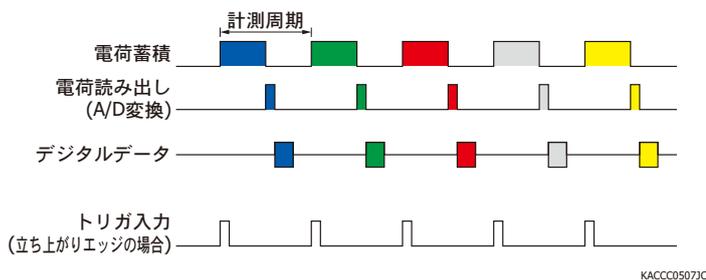

## 評価用ソフトウェア (付属品)

評価用ソフトウェア (SpecEvaluationUSB2.exe)\*8をPCにインストールすることにより、以下の基本的な操作を行うことができます。

- ・測定データの取得、保存
- ・測定条件の設定
- ・モジュール情報 (波長変換係数、分光器タイプなど)の取得
- ・グラフ表示
- ・演算機能
  - 画素No.から波長への変換
  - 参照データとの比較演算 (透過率、反射率)
  - ダーク減算
  - ガウス近似 (ピークの位置とカウント、半値幅)

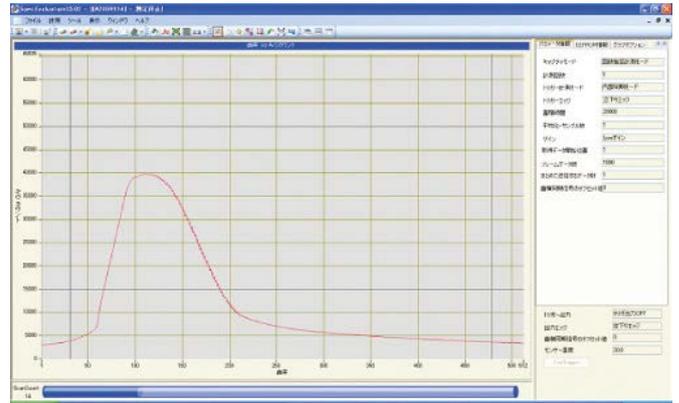

注) 1台のPCに8台までのミニ分光器を接続して使用することも可能です。

\*8: 対応OS: Microsoft Windows 10 Professional (32-bit, 64-bit)

ハードウェアを制御するためのDLLを用意しています。


以下の開発環境を用いて、ユーザーサイドにて独自の測定プログラムを開発することが可能です。

Microsoft Visual Studio® 2008 (SP1) Visual C++®

Microsoft Visual Studio 2008 (SP1) Visual Basic®

注) Microsoft、Windows、Visual Studio、Visual C++、Visual Basicは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

## 外形寸法図 (単位: mm)

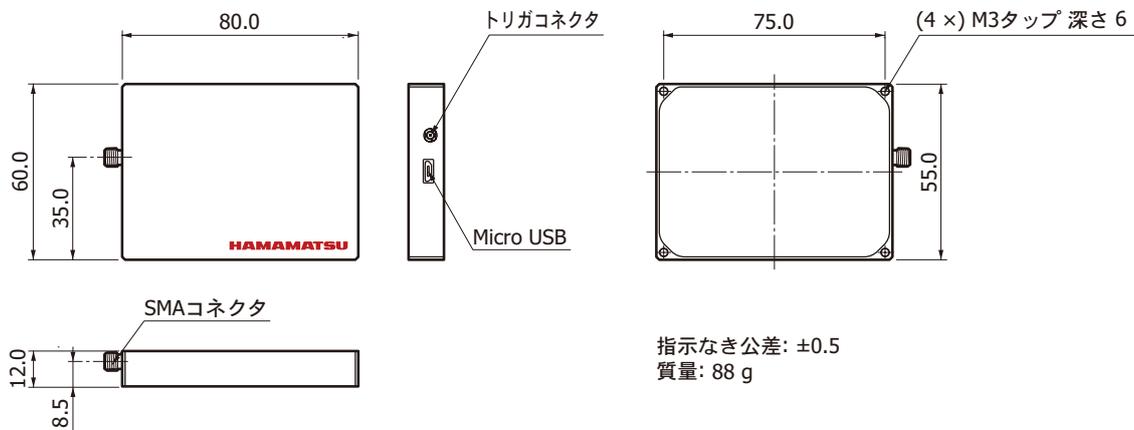

KACCA04153A

## ■ 付属品

- USBケーブル
- 専用ソフトウェア (評価用ソフトウェア、サンプルソフトウェア、DLL)


## ■ オプション (別売)

- ・ 入力用光ファイバ

型名	製品名	コア径 (μm)	仕様
A16963-01	可視/近赤外域用ファイバ	600	NA=0.22, 長さ1.5 m, 両端SMA905Dコネクタ付き

- ・ 外部トリガ入力用同軸ケーブル A12763

## ■ 外形寸法図 (単位: mm)

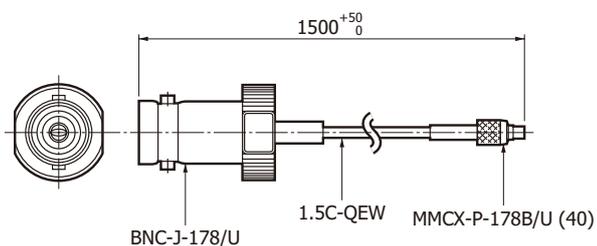

KACCA03581A

## ■ 関連情報

[www.hamamatsu.com/sp/ssd/doc\\_ja.html](http://www.hamamatsu.com/sp/ssd/doc_ja.html)

## ■ 注意事項

- ・ 製品に関する注意事項とお願い
- ・ ミニ分光器／使用上の注意

## ■ 技術情報

- ・ ミニ分光器／技術資料

本資料の記載内容は、令和6年3月現在のものです。

製品の仕様は、改良などのため予告なく変更することがあります。本資料は正確を期するため慎重に作成されたものですが、まれに誤記などによる誤りがある場合があります。本製品を使用する際には、必ず納入仕様書をご用命の上、最新の仕様をご確認ください。

本製品の保証は、納入後1年以内に瑕疵が発見され、かつ弊社に通知された場合、本製品の修理または代品の納入を限度とします。ただし、保証期間内であっても、天災および不適切な使用に起因する損害については、弊社はその責を負いません。

本資料の記載内容について、弊社の許諾なしに転載または複製することを禁じます。

## 浜松ホトニクス株式会社

[www.hamamatsu.com](http://www.hamamatsu.com)

仙台営業所	〒980-0021 仙台市青葉区中央3-2-1 (青葉通プラザ11階)	TEL (022) 267-0121 FAX (022) 267-0135
東京営業所	〒100-0004 東京都千代田区大手町2-6-4 (常盤橋タワー11階)	TEL (03) 6757-4994 FAX (03) 6757-4997
中部営業所	〒430-8587 浜松市中央区砂山町325-6 (日本生命浜松駅前ビル)	TEL (053) 459-1112 FAX (053) 459-1114
大阪営業所	〒541-0052 大阪市中央区安土町2-3-13 (大阪国際ビル10階)	TEL (06) 6271-0441 FAX (06) 6271-0450
西日本営業所	〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-13-6 (いちご博多イーストビル5階)	TEL (092) 482-0390 FAX (092) 482-0550

固体営業推進部 〒435-8558 浜松市中央区市野町1126-1 TEL (053) 434-3311 FAX (053) 434-5184